
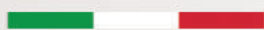


Paste & Flow

Vera

www.88dent.com

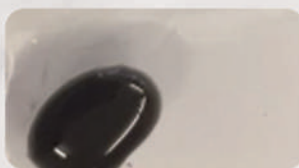

MADE IN ITALY



Paste & Flow

Vera

Aree di applicazione restauri indiretti fissi e removibili:

Corone
&
ponti

Inlays
onlays



Strutture
implantari

Faccette

L'idea:

- Massa flow per una semplice stratificazione con consistenza non troppo liquida
- Massa flow e massa pasta con caratteristiche simili
- Combinazione perfetta tra massa flow e massa pasta

Dentina → **Paste**
Incisale → **Flow**
Dentina + Incisale → **Flow**
Dentina + Incisale → **Paste**

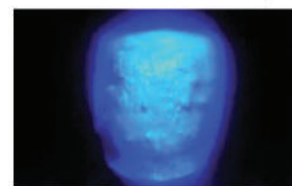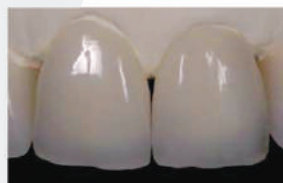

Benefici per il paziente:

Basso
sviluppo di
placca

Estetica
elevata nei
restauri

Totale
stabilità
nel colore

Altamente
resistente
alle
abrasioni



Paste & Flow

Vera

Benefici per l'operatore:

- Totale libertà di scelta tra PASTE & FLOW
- **Facile schema cromatico → Economico e veloce!**
- **Masse incisali = Masse occlusali → Economico e veloce!**
- **Sistematica estremamente semplice → ideale per lavori quotidiani**
- Masse Flow estremamente omogenee applicabili direttamente dalla siringa (con spatola o pennello a piacere)
- La struttura può essere ricoperta anche con strati sottili (Min. 0,7-0,8 mm / max 2mm)
- Materiale estremamente compatto esente da inclusioni
- Trasparenza calibrata
- Masse cervicali non necessarie

I vantaggi di 88Vera Paste & Flow:

Prodotto alternativo alla ceramica

- Ridotto rischio di insuccesso
- Facilità di intervento

Preparazione minima e poco invasiva

- Per veneers in composito
- Grazie alle sue caratteristiche è possibile provare il restauro prima della cementazione

Vantaggi della sistematica:

- Ottima capacità di copertura delle masse → intensità e opacità calibrate
- Ottima copertura anche con strati sottili
- Risultato finale eccellente

Vantaggi del sistema:

PASTE + FLOW è indicato per lavori quotidiani e per ogni tipo di laboratorio

Scadenze:

Opaco → **3 anni**

Composito in pasta → **5 anni**

Composito flow → **4 anni**





Paste & Flow

Vera**88Vera Paste & Flow tabella comparativa:**

	88Vera	88Vera	88Vera	3M® Espe	Ivoclar® Vivadent	GC®
Nome	Pasta Dentina	Pasta Occlusale	Flow	Sinfony Flow	Nexco	Gradia
Durezza	400 Mpa	560 Mpa	370 Mpa	265 Mpa	659 Mpa	420 Mpa
Resistenza alla flessione	95 Mpa	140 Mpa	140 Mpa	122 Mpa	101 Mpa	124 Mpa
Modulo elastico	6900 Mpa	10000 Mpa	6500 MPa	6500 MPa	7074 Mpa	6900 Mpa
Resistenza alla compressione	360 Mpa	450 Mpa	360 MPa	400 Mpa	363 Mpa	n.d.
Riempitivo	74%	75%	57%	n.d.	n.d.	n.d.



Paste & Flow

Vera

88Vera Paste & Flow tabella colori:

Scala colori secondo Vita®*	Opaco	Dentina	Smalto
A1	light	A1 / B1	S 58
A2	light	A2 / B2	S 58
A3	light	A3	S 59
A3,5	medium	A3,5	S 59
A4	medium	A4	S 60
B1	light	A1 / B1	S 57
B2	medium	A2 / B2	S 58
B3	light	B3 / B4	S 59
B4	medium	B3 / B4	S 59
C1	medium	C1 / D2 / D3 / D4	S 59
C2	medium	C2 / C3 / C4	S 59
C3	dark	C2 / C3 / C4	S 59
C4	dark	C2 / C3 / C4	S 60
D2	light	C1 / D2 / D3 / D4	S 60
D3	dark	C1 / D2 / D3 / D4	S 59
D4	dark	C1 / D2 / D3 / D4	S 60
Incisale	-	-	clear
Incisale	-	-	light
Gengiva	light, medium, dark, super dark		
Effetti	white, blue, orange, khaki, dark brown, red, black		

* Vita is a registered trademark of Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen



Paste & Flow

Vera

88Vera Paste & Flow: come raggiungere un risultato perfetto?

Esempio:

Creare il colore **D2**:

Opaco **light** + D2 / D3 + **S60** = **D2**

Creare il colore **D3**:

Opaco **dark** + D2 / D3 + **S59** = **D3**



Ulteriori prodotti:

88Bondopaquer Pink	88Vera Composito Radiopaco	88Bonding
88Cover	88Modelling	88Metal Primer
88Metal Connect	88Vera ZR-Primer	88Vera ZR-Cem
88Vera Metal-Cem	88Vera Polish 3	88Vera Polish Glaze

88Bondopaquer Pink

Unico!

- Bondopaquer e primer tutto in uno
- Fotopolimerizzabile
- Ottima copertura del metallo



88Vera Composito Radiopaco





Paste & Flow

Vera

88Bonding

Bonding fluido fotopolimerizzabile per attivare la superficie del composito in caso di aggiunta

88Metal Connect

- Ottima interfaccia adesiva tra Metal Primer e Opaco
- Facilmente stendibile
- Elevato miglioramento del legame

88Vera ZR-Primer

- Eccellente adesione
- Elevato miglioramento del legame

88Vera Metal-Cem

Collante specifico per metallo/metallo

88Vera Polish Glaze

Pasta brillantante

88Modelling

Liquido umettante per la modellazione di ponti e corone

88Metal Primer

- Lavorabilità facile e veloce
- Eccellente adesione

88Vera ZR-Cem

Collante specifico per zirconio/zirconio, zirconio/metalli, zirconio/disilicato, zirconio/composito

88Vera Polish 3

Pasta abrasiva diamantata

Corone
&
ponti

Inlays
onlays

Strutture
implantari

Faccette

Basso
sviluppo di
placca

Estetica
elevata nei
restauri

Totale
stabilità
nel colore

Altamente
resistente
alle
abrasioni



Paste & Flow

Vera

Tecnica di stratificazione:



1. 88Metal Primer



2. 1° Opaco




3. 2° Opaco



4. Dentina area marginale



5. Flow area marginale

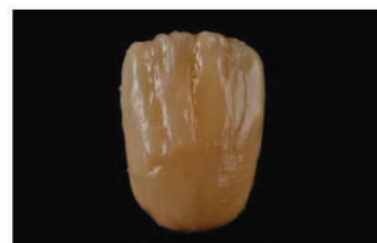

6. Completamento area dentinale



7. Finalizzazione area dentinale



8. Flow dentinale




9. Incisale



10. Flow Incisale



11. Flow Incisale

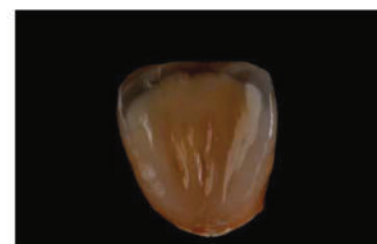

12. Risultato finale



13. Risultato finale



filiera responsabile per oro e platinoidi
dalla fonte al consumatore

88
dent

E' un marchio

8853^{Spa}

8853 Spa

Sede commerciale - Uffici amministrativi - Stabilimento

Via Pitagora 11 - 20016 Pero (MI)

Tel. +39 02 8853.501 - info@88dent.com

www.88dent.com

Centro Assistenza 88Dent

Via Albertini 1 - 60131 Ancona - Tel. +39 071.2916.288

Azienda con sistema di qualità certificato
secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI CEI EN ISO 13485:2012

